

LeEject 2® 歯科用注射器および注射針システム

はじめに

この LeEject 2 注射器および注射針システムは既存のテクノロジーの中のリキャップおよび捻って外す工程を排除す。この新しいテクノロジーは学習プロセスを踏む必要があるため、ウェブサイト www.LeEject.com にアクセスして教育用ビデオをご覧ください。

使用目的

この LeEject 注射器および注射針は、歯科治療前または治療中に投与される浸潤および神経ブロック麻酔のための局部麻酔用カートリッジとして使用されるものです。

警告

1. 注射針が破損する原因となる場合があるので注射針に極度の物理的な圧力を加えたり、曲げたりすることは避けてください。
2. 針を落とせばあい、手では拾わず、歯科用プライヤーまたは止血鉗子を使用して落ちた針を拾ってください。
3. キャップを外した針は他の歯科スタッフには渡さないようにして針刺し事故を避けてください。



注意

1. LeEject 2注射器は、LeEject 注射針と合わせてのみ使用できます。
2. 針を安全に廃棄するためには、Covidien社製 Sharps-A-Gator (モデル番号 31144010) またはBD社製 Wallmateなどの大きな開口部のある鋭利物容器をお勧めします。各々の治療エリアには鋭利物容器の備えることが義務づけられています。
3. 同一の患者に一本の針を使用して複数回注射を打つことはできるものの、使用した注射針は注射後直ちに廃棄してください。後でさらに注射をする場合は、新しい針を使用してください。
4. シールが破れている場合、注射針は無菌ではないため使用しないでください。
5. プラスチック製の安全ガードが破損しているときは、交換してください。


クリーニング、殺菌方法

1. 注射器は非無菌状態で販売されているため、使用前に殺菌してください。
2. 各処置後、注射器を超音波洗浄器で完全にクリーニングして血液、唾液、麻酔薬溶液の残留物を除去してください。
3. 注射器はクリーニング後、承認された国家/国際標準に基づいた方法で加圧滅菌器により殺菌してください。加圧滅菌器のガイドラインを守って、適切に殺菌してください。
4. 注射器は乾燥した無菌のエリアに保管してください。


LeEject 2® Syringe Instructions

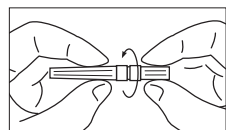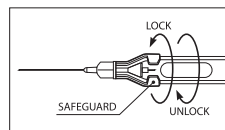


1. Twist off the protective cap.

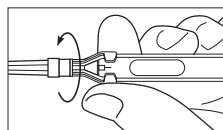

2. Place the needle into the syringe and rotate the plastic Safeguard counter clockwise.

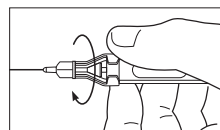

3. After use, remove cartridge and turn over Safeguard clockwise.

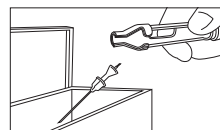

4. Position syringe and invert it so that needle falls into sharps container.



LeEject 2® Syringe & Needle
Dental Safety Device

使用方法

教育用ビデオを弊社ウェブサイト www.LeEject.com

この LeEject 注射針の挿入

1. 安全ガードは唯一のプラスチック製の部品であり、注射針を固定するようにデザインされています。安全ガードを回転して、円錐形のレセプタクル部分にそろえてください。
2. 短い保護キャップを捻り取り、円錐部分を剥きだししてから、注射針の円錐部分を注射器にはめてください。
3. 安全ガードを時計方向に回し、注射針を安定させます。
4. 注射直前に長いキャップを取り外してください。

麻酔薬カートリッジの挿入

プランジャーを引きながら麻酔薬カートリッジを注射器のシリンダーの中に入れてください。

手動吸引

サムリングを軽く叩いて、注射器がカートリッジのゴム製プランジャーにかみ合うようにします。注射直前には必ず吸引し、ゆっくりと注射してください。

カートリッジの取外し

サムリングを手早く引いて、注射器をカートリッジからはずします。下側の小さな窓からカートリッジを押し出してください。もう一方の手の親指と人差し指でカートリッジを取り出します。別のカートリッジが必要な場合は、それを注射器に入れてください。

注射針の廃棄

1. まずカートリッジを取り除いてから注射針を取り外してください。
2. 安全ガードを反時計方向に回して注射針の円錐部分が見えるようにしてから、注射器を上下逆さまにし、その下に置いた鋭利物容器の開口部に注射針が直接落ちるようにしてください。
3. 別の方法として、注射針を歯科トレイの上に廃棄します。注射針は歯科用プライヤーまたは止血鉗子で直ちに持ち上げて、鋭利物容器の中に捨ててください。作業場所を安全で清潔な状態に保ってください。

お使いの方へ

お問い合わせ先：Advanced Technology & Capital, Inc. 5 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632
電子メール：info@LeEject.com、電話：+1 201 803 5202。