

# Il sistema di siringhe ed aghi dentali LeEject 2®

## Introduzione

Il sistema di siringhe e di aghi dentali LeEject 2 è un dispositivo dentale studiato per **eliminare le fasi di richiusura e svitamento delle attuali tecnologie. Questa nuova tecnologia necessita di un processo di apprendimento, pertanto si prega di visitare [www.LeEject.com](http://www.LeEject.com)** e di guardare il video con le istruzioni.

## Indicazioni per l'uso

Le siringhe e gli aghi LeEject sono indicati per l'uso con cartucce di anestetico locale per anestesia per infiltrazione e con blocco nervoso, somministrato prima o durante le procedure dentali.

## Avvertenze

1. NON applicare una pressione fisica eccessiva sull'ago e non piegarlo per evitare che si rompa.
2. NON afferrare gli aghi caduti con le mani; usare pinze dentali o emostatiche per raccoglierli.
3. Non passare aghi senza cappuccio al personale **dentistico per evitare il rischio di punture.**

## Precauzioni

1. Le siringhe LeEject 2 possono essere usate solo con gli aghi LeEject.
2. Si raccomanda di usare un contenitore per oggetti acuminati con apertura larga, come Sharps-A-Gator di Covidien (modello 31144010) o Wallmate di BD, per semplificare la raccolta degli aghi. È obbligatorio avere un contenitore per oggetti acuminati in ogni zona di trattamento.
3. **È possibile eseguire iniezioni multiple sullo stesso paziente usando un solo ago, ma l'ago usato deve essere immediatamente eliminato quando le iniezioni sono state completate. Se in un momento successivo si rendono necessarie ulteriori iniezioni, usare un ago nuovo.**
4. In caso di rottura del sigillo, l'ago non è più sterile e non deve essere usato.
5. Se la protezione è danneggiata, sostituirla.

## Istruzioni per la pulizia/sterilizzazione

1. Le siringhe sono fornite non sterili e devono essere sterilizzate prima dell'uso.
2. Al termine di ogni procedura la siringa deve essere accuratamente pulita in un pulitore a ultrasuoni per eliminare ogni traccia di sangue, saliva e soluzione anestetica.
3. Dopo la pulizia, sterilizzare la siringa in autoclave in base agli standard nazionali/internazionali approvati. Seguire le linee guida dell'autoclave per garantire una sterilizzazione adeguata.
4. Conservare le siringhe in un luogo asciutto e sterile.

## Istruzioni per l'uso

Guardare il video delle istruzioni sul nostro sito, [www.LeEject.com](http://www.LeEject.com).

### Inserimento dell'ago LeEject

1. La protezione è l'unica parte in plastica ed è studiata per bloccare l'ago. Ruotare la protezione per allineare la zona retraibile a cono.
2. Svitare il cappuccio protettivo corto, esporre il cono e inserire la parte a cono dell'ago nella siringa.
3. Ruotare la protezione in senso orario per stabilizzare l'ago.
4. Rimuovere il cappuccio lungo appena prima dell'iniezione.

### Inserimento della cartuccia di anestetico

Tirando lo stantuffo, inserire la cartuccia di anestetico nel cilindro della siringa.

### Aspirazione manuale

Picchiare sull'anello in modo che l'arpione si innesti nello stantuffo di gomma della cartuccia. Aspirare sempre prima dell'iniezione e iniettare lentamente.

### Rimozione della cartuccia

Disinnestare l'arpione dalla cartuccia tirando rapidamente l'anello. Estrarre la cartuccia attraverso la finestrella sottostante. Afferrare la cartuccia con il pollice e l'indice opposti. Se è necessario usare un'altra cartuccia, introdurre una nuova nella siringa.



### Smaltimento dell'ago

1. **Rimuovere la cartuccia prima di rimuovere l'ago.**
2. Ruotare la protezione in senso antiorario per esporre la parte a cono dell'ago e capovolgere la siringa in modo che l'ago cada direttamente nell'apertura del contenitore di raccolta sottostante.
3. In alternativa eliminare l'ago su un vassoio dentale. Usare pinze dentali o emostatiche per afferrare l'ago e introdurlo **immediatamente** nel contenitore per oggetti acuminati. L'area di lavoro deve essere pulita e sicura.


### Informazioni sull'assistenza utenti:

Contattare Advanced Technology & Capital, Inc., 5 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632 per e-mail all'indirizzo [info@LeEject.com](mailto:info@LeEject.com) o telefonicamente al numero +1 201 803 5202.


## LeEject 2® Syringe Instructions

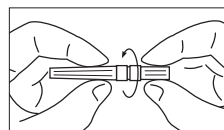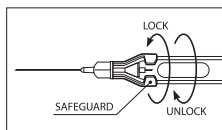


1. Twist off the protective cap.

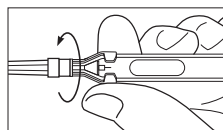

2. Place the needle into the syringe and rotate the plastic Safeguard counter clockwise.

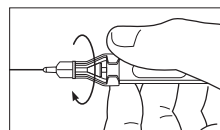

3. After use, remove cartridge and turn over Safeguard clockwise.

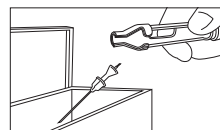

4. Position syringe and invert it so that needle falls into sharps container.



**LeEject 2® Syringe & Needle**  
Dental Safety Device